




CATÁLOGO

**SIMULADOR DE RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR TM-404**

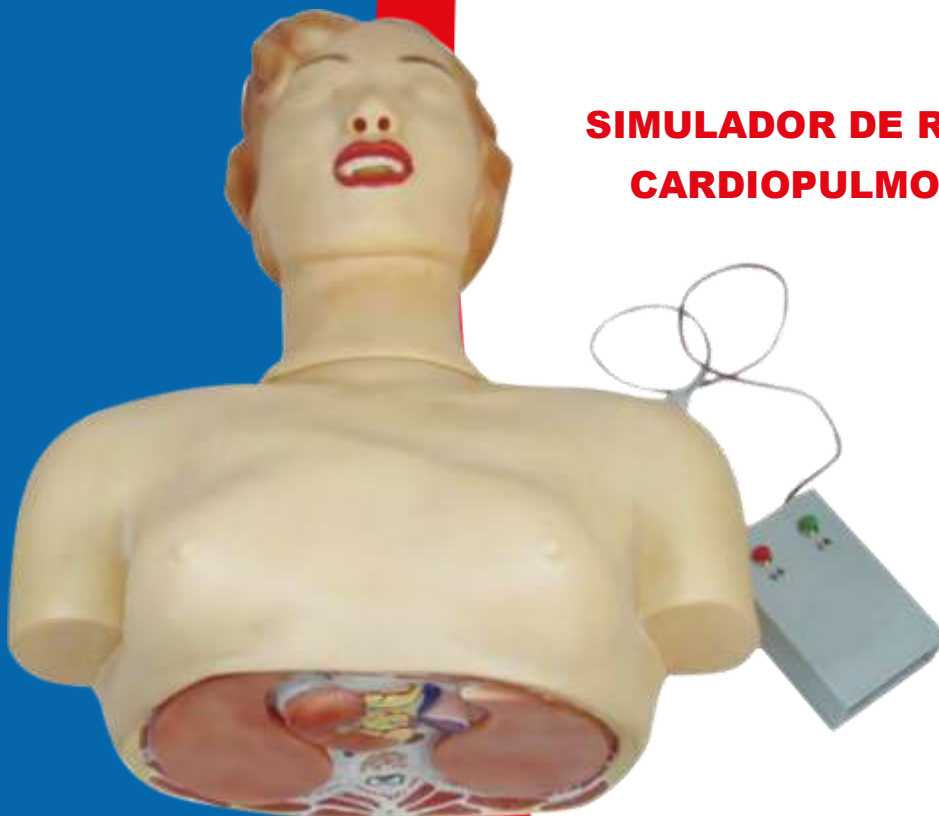

www.tech-model.com

SIMULADOR DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR TM-404

El modelo está diseñado de acuerdo con medio cuerpo anatómico humano, que sirvió como una ayuda de enseñanza para la educación, la higiene, el entrenamiento de primeros auxilios y la demostración. Muestra el medio cuerpo desde la cabeza hasta la sexta costilla del cofre. La sección transversal está pintada con colores para mostrar diferentes órganos de forma clara y vívida. La forma completa del corazón y el pulmón muestra los distintos movimientos al demostrar la presión del corazón y la respiración boca a boca.

FUNCIÓN:

Presión cardíaca en el pecho

Respiración boca a boca o respiración boca a nariz

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Parte del corazón: consiste en un modelo de primavera y corazón. El resorte puede permitirse 43.5kg de presión y 130,000 veces sin distorsión. El corazón puede extruirse y rebotar cuando se demuestra la presión del corazón en el pecho.

Parte de la respiración: hay diferentes tubos que conectan la boca y la nariz a la bolsa pulmonar (la capacidad es de 500-800 ml), respectivamente. Si la cabeza está levantada, los tubos de boca y nariz se unen a la bolsa pulmonar. De lo contrario, los tubos están prohibidos en la bolsa del pulmón.

Parte del cuello: la articulación del cuello es movable, por lo que la cabeza puede elevarse 75 grados. La arteria del cuello puede pulsar en fase con los latidos del corazón.

Parte del ojo: un alumno es normal, otro es grande. El párpado se puede abrir y cerrar.

Parte de la nariz y la boca: el ala de la nariz es suave, fácil de ajustar. La boca puede abrirse y cerca.

La piel es elástica con un color de piel natural. No habrá envejecimiento, distorsión y desvanecimiento bajo la temperatura de 40 °C -50 °C.

La señal de instrucción muestra que la operación es correcta o no.

INSTRUCCIÓN DE USO:

Antes de la demostración, coloque 2 baterías en la caja de instrucciones y conéctelas a la toma del lado derecho del modelo.

Al demostrar la presión del corazón, si presiona en el lugar correcto con la presión correcta (la costilla está hundida en 3-4 cm), la luz verde brillante. Si la presión es demasiado grande (la costilla tiene una cavidad de más de 4 cm), la luz roja es

brillante. Si presiona en un lugar incorrecto o la presión es demasiado pequeña, no habrá luz brillante.

Al demostrar la respiración boca a boca o la respiración de la boca a la nariz, eleve la cabeza 75 grados, ajuste la nariz, sople aire 500-800 ml, el pecho se encorvará y se expandirá la bolsa del pulmón, que se puede ver en la sección transversal.

DESINFECCIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Cuando opere la respiración boca a boca, cúbrase la boca con una gasa o limpie con un tampón en caso de infección cruzada.

Después del uso, abra el cofre para quitar los tubos para la desinfección, límpielos y límpielos para el próximo uso.

Use detergente para fines de limpieza, se prohíbe la cetona líquida. Retire las baterías cuando no use el modelo por mucho tiempo en caso de corrupción. Se recomienda que el modelo se almacene en un lugar limpio y seco.

