




CATÁLOGO

**SIMULADOR DE TRABAJO DE PARTO
DIFICIL (DISTOCIA) TM-419B**

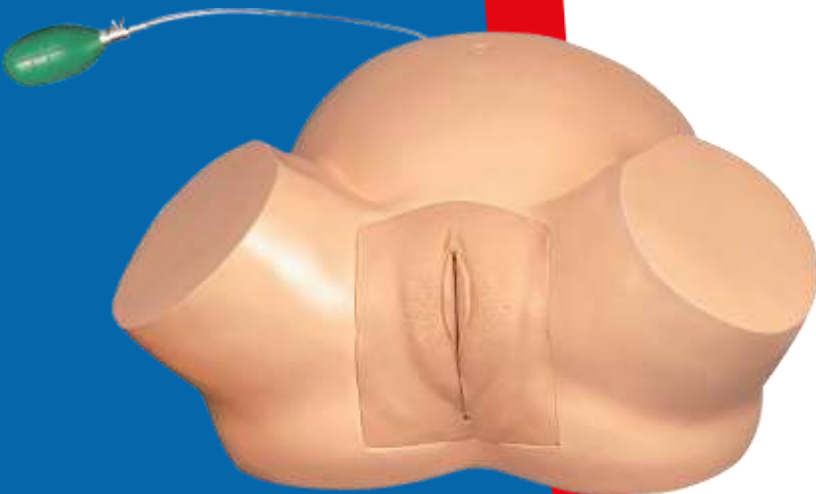

www.tech-model.com

SIMULADOR DE TRABAJO DE PARTO DIFICIL (DISTOCIA) TM-419B

CARACTERÍSTICAS:

El modelo puede demostrar una amplia variedad de entregas normales y anormales. Consiste en la pelvis en la parte inferior del abdomen y el feto, con una estructura razonable, muy similar a la real embarazada, puede demostrar el nacimiento normal y el movimiento de la partería de la operación real

USO:

El modelo puede simular el proceso del nacimiento y la partería normales. En el curso de parto normal, el occipital anterior (cefálico primero) ocupa aproximadamente el 90%. Pero la anterior occipital izquierda es la más frecuente en el 90% de los cursos. Este modelo demuestra cada paso a través de la posición anterior occipital izquierda en el parto normal: convergencia-abajo-flexión-rotación interna-extensión-reducción y rotación externa-entrega de hombro fetal y más.

El modelo puede simular el parto por distocia (posición fetal anormal de nalgas) y el proceso de partería. Clínicamente, la posición fetal anormal ocupa alrededor del 10%.

En cada paso del parto, en particular, cuando se administra la cabeza del feto durante la capacitación, se necesita asistencia de partera.

El polvo de talco se puede utilizar para lubricar la cabeza del feto, el canal de parto, el perineo y otras partes del cuerpo.

El modelo puede simular la pelvis estrecha al inflar el balón y demostrar el proceso de distocia.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO:

1. Mantenga el modelo en un lugar ventilado y seco. No coloque el modelo en un lugar húmedo o expuesto al sol en caso de que se reduzca su vida útil.
2. El tiempo de la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de pedido de los productos, si el modelo se rompe debido a algún procedimiento de producción o problemas de artesanía, nuestra empresa proporcionará servicio de reparación gratuito en 12 meses y servicio de reparación recargable de forma permanente.

LISTA DE EMPAQUE

Nº	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Observación
1	Modelo de entrenamiento de distocia	PC	1	
2	Botella de polvo de talco	Botella	1	
3	Especificación	PC	1	
4	Estuche portátil de lujo	PC	1	